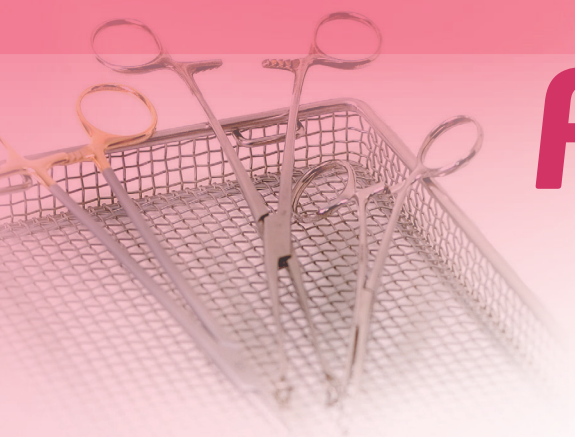




# ANIOSYME 1 SYNERGY

## DETERDŽENT ZA INSTRUMENTE

- Dokazana snaga čišćenja
- Formulacija enzima učinkovita na svim vrstama prljavštine
- Učinkovito s vodom bilo koje kvalitete
- Može se upotrebljavati s ANIOS dezinficijensima visokog stupnja djelotvornosti

### INDIKACIJE

Čišćenje medicinskih i kirurških instrumenata, medicinskih uređaja, instrumenata osjetljivih na toplinu i endoskopske opreme.

### KARAKTERISTIKE

- Boja: bistro plava
- pH čistog proizvoda:  $\approx 8,4$
- Gustoća  $\approx 1,08$

### SASTAV

Ne-ionski i anionski tenzidi, proteaza i pomoćne tvari.

### UPUTE ZA UPORABU

Koncentrirana otopina za profesionalnu uporabu.

Koristiti pri razrjeđenju od 0,5%.

Djeluje nakon 1 minute.

Četkati ako je potrebno.

Dobro isprati.

Mijenjajte radnu otopinu najmanje jednom dnevno.

### MJERE OPREZA PRI UPORABI

Opasno - poštujte mjere opreza pri uporabi (sastavljeno prema važećim europskim pravilima vezanima uz klasifikaciju i označavanje kemijskih proizvoda).

Spremanje: na temperaturi između  $+5^{\circ}\text{C}$  i  $+35^{\circ}\text{C}$ .

Medicinski uređaj Klase I (Direktiva 93/42/EEZ, s važećim izmjenama i dopunama).



### PAKIRANJE

12 dozirnih boca, svaka od 1 L

4 kanistra, svaki od 5 L + pumpica od 25 ml

Ref.2493.095

Ref.2493.036



Laboratoires  
**ANIOS**  
Le professionnel de la désinfection

PLIVA HRVATSKA d.o.o.,  
Zastupnik i distributer za Republiku Hrvatsku,  
Prilaz baruna Filipovića 25,  
10000 Zagreb, Hrvatska.  
Tel.: + 385 1 37 20 000,  
Faks: + 385 1 37 20 111;  
[www.pliva.hr](http://www.pliva.hr), [www.plivamed.net](http://www.plivamed.net)

Pavé du Moulin  
59260 Lille-Hellemmes - France  
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68  
[www.anios.com](http://www.anios.com)



HR2493-170503 - Izvanugovorne fotografije  
**SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE**  
HR/ANIO/17/0004 - datum sastavljanja: 05/2017