

ANIOSPRAY QUICK

Dezinfekcijsko
sredstvo u spreju



- Otopina spremna za uporabu
- Na bazi etanola
- Širok spektar aktivnosti u kratkom vremenu
- Ne ostavlja tragove pri sušenju
- Ugodan miris
- Formulacija bez aldehida, bez boja

INDIKACIJE

Dezinfekcija s brzim djelovanjem medicinskih uređaja koji se ne mogu potapati, prethodno očišćenih i otpornih na alkohol (stetoskopi, kabeli i konektori, senzori tlaka, testeri razine glukoze u krvi...).

KARAKTERISTIKE

- Proizvod spreman za uporabu
- Čista bezbojna tekućina
- Gustoća: oko 0,9
- pH na + 20°C : oko 5,5

SPREMAN ZA
UPORABU




mini
30 sek

ANIOSPRAY QUICK

Dezinfekcijsko sredstvo u spreju

UPUTE ZA UPOTREBU


Za korištenje s ručnim ANIOS raspršivačem

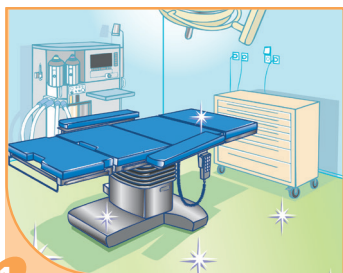

1 Očistite prethodno medicinske uređaje ANIOS deterđentnim dezinficijensom.



2 Prskati ravnomjeran sloj na površine medicinskih uređaja.

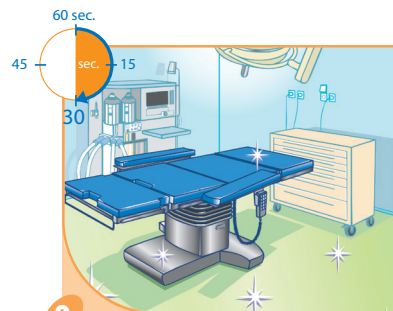

3 Vrijeme kontakta minimum 30 sekundi.

SASTAV

Hydroalkoholna otopina (etanol 55%), kvarterni amonij propionat, miris.

MJERE OPREZA PRI UPORABI

Opasno - slijedite mjere opreza (utvrđene prema važećim europskim pravilima o klasifikaciji i obilježavanju kemikalija).
Skladištenje: od +5° do +25°C.

Medicinski uređaj klase IIa (Direktiva 93/42/EEZ s izmjenama i dopunama)

PAKIRANJE

- 1 12 boca od 1 litre s 4 prskalice Ref. 2084.073
2 4 kanistra od 5 litara..... Ref. 2084.034

MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA

Aktivan na	Standardi	Kontaktno vrijeme
Bakterije	EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697. MRSA (EN 14561)	30 sekundi
Mikobakterije	<i>Mycobacterium terrae</i> : EN 14348, EN 14563	30 sekundi
	<i>Mycobacterium avium</i> : EN 14348, EN 14563	5 minuta
Kvasci / Plijesni	<i>Candida albicans</i> : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697. <i>Tricophyton mentagrophytes</i> : EN 14562	30 sekundi
	<i>Aspergillus niger</i> : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697.	5 minuta
Virusi	Djelotvoran prema EN 14476: <i>Adenovirus</i> , HIV-1, PRV (model virusa HBV), BVDV (model virusa HCV), <i>Vaccinia virus*</i> , <i>Herpesvirus</i> , <i>Coronavirus</i> , <i>Rotavirus</i> , <i>Virus gripa A (H1N1)</i>	30 sekundi
	<i>Feline Caliciviru</i> , MNV	5 minuta

* RKI: Institut Robert Koch preporučuje korištenje sredstava za dezinfekciju sa zahtjevom "ograničene snage" ili ograničenom virucidnom aktivnošću kako bi se prekinuo lanac prijenosa infekcije. Prema Institutu, ograničena virucidna aktivnost odgovara aktivnosti na virus vakcine i BVDV.

Sve antimikrobne aktivnosti proizvoda uključene su u znanstveni dosije, koji je dostupan na zahtjev.



PLIVA HRVATSKA d.o.o.,
Zastupnik i distributer za Republiku Hrvatsku,
Prilaz baruna Filipovića 25,
10000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: +385 1 37 20 000,
Faks: +385 1 37 20 111;
www.pliva.hr, www.plivamed.net

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax: +33 3 20 67 67 68
www.anios.com



HR2084-170518- Izvanugovorne fotografije
SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE
HR/ANIO/17/0011 - datum sastavljanja: 04/2017